



Anleitung zur DocNet move App

für Android und iOS Geräte



Inhalt

1. Zugang zur App

| | | |
|-----|------------------------|---|
| 1.1 | Download der App | 1 |
|-----|------------------------|---|

2. Funktionen ohne Freischaltung

| | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 2.1 | Registrierung | 1 |
| 2.2 | Fingerabdruck hinterlegen | 1 |
| 2.3 | Ansprechpartner | 2 |
| 2.4 | Leistungsverzeichnis | 2 |
| 2.5 | Über das Labor | 2 |

3. Funktionen nach der Anmeldung

| | | |
|-------|--|---|
| 3.1 | Anmelden | 2 |
| 3.2 | Anmelden per Fingerabdruck..... | 2 |
| 3.3 | Befundsuche | 3 |
| 3.4 | Befundliste | 4 |
| 3.5 | Befundansicht..... | 4 |
| 3.5.1 | Nachfordern von Analysen | 4 |
| 3.5.2 | Befunde per e-Mail verschicken | 4 |
| 3.6 | App Einstellungen | 5 |
| 3.6.1 | Passwort und Accountdaten ändern | 5 |

4. Kontakt

| | | |
|-----|--------------|---|
| 4.1 | Kontakt..... | 6 |
|-----|--------------|---|



1. Zugang zur App

1.1 Download der App

- Öffnen Sie auf Ihrem Android Gerät den Google Play Store, bzw. auf Ihrem iOS Gerät den App Store.
- Geben Sie in das Suchfeld „Nordlab“ ein und lassen danach suchen.
- Wählen Sie Nordlab Onlinebefunde aus und lassen Sie die App kostenlos installieren.



Nach erfolgreicher Installation können Sie die Nordlab App verwenden.

2. Funktionen ohne Freischaltung

2.1 Registrierung



- Sollten Sie über keine Zugangsdaten verfügen, tippen Sie im Startbildschirm auf den Button „Registrieren“.

Die mit dicker Schrift gekennzeichneten Formularfelder sind Pflichtfelder.

Das Kennwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein und muss ein Sonderzeichen enthalten. z.B. @,!,...

Bitte bestätigen Sie Ihre eingegebenen Daten mit dem Button „Registrieren“.

Aus Datenschutzgründen setzt sich unser Support-Team vor der Freischaltung Ihrer Zugangsdaten schnellst möglich über die bei uns hinterlegte Telefonnummer Ihrer Praxis in Verbindung.

2.2 Fingerabdruck hinterlegen



Um die zeitraubende Benutzerauthentifizierung mittels Benutzer und Passwort zu erleichtern, ist es auf mobilen iOS und Endgeräten mit Android ab Version 6 möglich sich per Fingerabdruck zu authentifizieren. Hierzu muss Ihr Fingerabdruck wie folgt in der App hinterlegt werden.

- Starten Sie die App und geben Ihre freigeschalteten Zugangsdaten ein.
- Tippen Sie auf den Button „Fingerabdruck hinterlegen“.

Beim nächsten Start der App können Sie sich nun mit Ihrem Fingerabdruck authentifizieren. siehe Punkt 3.2

Achtung: Um einen Fingerabdruck in der App zu hinterlegen, muss der Fingerabdrucksensor Ihres Mobilgerät eingeschaltet sein.



2.3 Ansprechpartner



Über den Button „Ansprechpartner“ können Sie schnell und einfach, mit den von Ihnen gewünschten Abteilungen Kontakt aufnehmen. Sie können direkt aus der App die gewünschte Telefonnummer anwählen, oder auch eine e-Mail schreiben.

2.4 Leistungsverzeichnis



Über den Button „Leistungsverzeichnis“ haben Sie immer und überall unser gesamtes Leistungsverzeichnis dabei. Das Leistungsverzeichnis kann bequem von Ihnen durchsucht werden.

2.5 Über das Labor



Über den Button „Über das Labor“ können Sie das Impressum der App einsehen. Desweiteren können Sie hier die Version der App einsehen.

3. Funktionen nach der Anmeldung

3.1 Anmelden

anmelden

- Starten Sie die App.
- Geben Sie Ihre freigeschalteten Logindaten ein.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch den Button „anmelden“ um sich einzuloggen.

3.2 Anmelden per Fingerabdruck



- Starten Sie die App.
- Tippen Sie auf den Button „Fingerabdruck“.
- Legen Sie den Finger, mit dem von Ihnen hinterlegten Fingerabdruck auf den Fingerabdruckscanner Ihres Mobilgerätes.



3.3 Befundsuche



- Tippen Sie auf den Button „Befunde“.
- Setzen Sie Ihre Suchkriterien.
- Tippen Sie auf den Button „suchen“.

Für eine komfortable Befundsuche haben Sie im nun angezeigten Bildschirm die Möglichkeit verschiedene Filter für Ihre Suche zu setzen. Sollten Sie keinen Filter setzen, werden Ihnen die Befunde der letzten 3 Tage angezeigt.

In dem Feld „Patient/Untersuchung“ können Sie Patientendaten als Filter eingeben. Dabei können mehrere Kriterien durch Leerzeichen getrennt eingegeben werden.


Folgende Reihenfolge muss eingehalten werden:

Auftragsnr. - Patientencode - Nachname - Vorname - Geburtsdatum

Einzelne Kriterien können ganz fehlen oder nur in Bruchstücken eingegeben werden.

Unter Eingabe einer Untersuchung können Sie sich alle Befunde mit einer bestimmten Analyse des gewählten Zeitraums anzeigen lassen.

Um sich nur Befunde mit auffälligen Werten anzeigen zu lassen, können Sie den Filter „Nur pathologische Befunde“ setzen.

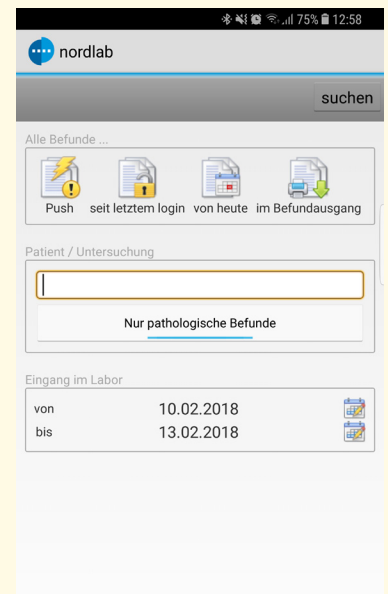

Push

Anzeige aller noch nicht gesehenen Befunde für die eine Pushnachricht ausgelöst wurde.



seit letztem Login

Anzeige aller neuen, oder ergänzten Befunde seit dem letzten Login.



von heute

Anzeige aller Befunde des aktuellen Tages.



im Befundausgang

Anzeige aller Befunde, die noch nicht per DFÜ in Ihr Laborinformationssystem übertragen wurden.




3.4 Befundliste

Nach der Befundsuche wird Ihnen eine Befundliste mit Ihren Suchergebnissen angezeigt. In der Befundliste werden Ihnen pro Seite bis zu 50 Befunde angezeigt.



Mit den < > Zeichen können Sie durch die Seiten blättern.


In der Befundliste wird Ihnen zu jedem Befund die Laboreingangszeit, die Laborausgangszeit, sowie Name, Geburtsdatum und Geschlecht des Patienten angezeigt.

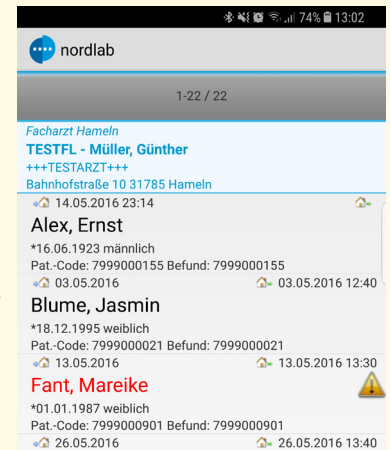Befunde mit pathologischen Werten werden in roter Schrift und mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet.



3.5 Befundansicht

In der Befundansicht werden pathologische Werte farblich und zur besseren Visualisierung mit den   Zeichen gekennzeichnet.

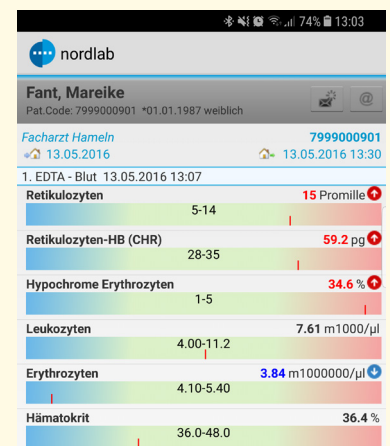

3.5.1 Nachfordern von Analysen



- Suchen und öffnen Sie den Befund zu dem Sie eine Untersuchung nachfordern möchten.
- Tippen sie auf das Nachforderungs-Symbol.
- Geben Sie die gewünschten Nachforderungen ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

Bitte geben Sie die Nachforderung ein:

ft3 ft4

Abbrechen Ok

3.5.2 Befund per Mail verschicken



- Suchen und öffnen Sie den Befund den Sie sich per e-Mail schicken möchten
- Tippen sie auf das e-Mail-Symbol.

Der Befund wird als verschlüsseltes PDF-Dokument an die in unserem System hinterlegte e-Mail-Adresse verschickt.

Sollten Sie diese Funktion nutzen wollen, ist es zwingend notwendig, dass ein Passwort für die Verschlüsselung der Befunde bei uns im System hinterlegt wird.



3.6 App Einstellungen



In den Einstellungen haben Sie die Möglichkeit die Pushfunktion der App ganz nach Ihren Wünschen zu konfigurieren.

Handy ist registriert

Mit dieser Funktion können Sie die Pushfunktion der App ein bzw. ausschalten. Sollten Sie über mehrere Endgeräte mit der App verfügen, können Sie über diese Funktion steuern, auf welchem Gerät Sie benachrichtigt werden wollen.

Alle neuen Befunde

Alle neuen Laborergebnisse, die von uns für die App bereitgestellt werden, lösen eine Pushnachricht aus.

Notfall Befunde

Nur Laboraufträge, die als Eilig oder Notfall gekennzeichnet sind, lösen eine Pushnachricht aus.

Pathologische Werte


Nur Laborergebnisse, die ausserhalb der Referenzwerte liegen, lösen eine Pushnachricht aus.

Panik Werte

Es werden nur hochpathologische Ergebnisse gepusht. Standardmäßig sind diese Schwellenwerte vom Labor festgelegt.

Sollten Sie für bestimmte Laboruntersuchungen eigene Schwellenwerte festlegen wollen, setzen Sie sich bitte mit unserem Support-Team in Verbindung.

Selbstverständlich können Sie die einzelnen Benachrichtigungskriterien kombinieren.

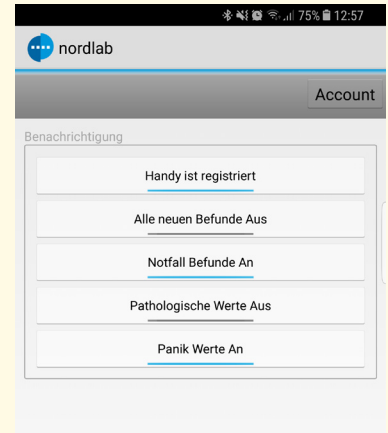

3.6.1 Passwort und Accountdaten ändern

Account

- Melden Sie sich in der App wie gewohnt an.
- Tippen Sie auf Einstellungen.
- Tippen Sie auf den „Account“ Button.
- Ändern Sie Ihr Passwort oder Ihre Accountdaten und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem „Registrieren“ Button.

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, setzen Sie sich bitte mit unserem Support-Team in Verbindung.

